

Hilfsmittel
für die Kolondiagnostik

PRODUKTKATALOG



primed[®]



Primed[®] Medizintechnik GmbH ist ein erfahrener Hersteller von Medizinprodukten.

Seit vielen Jahren beliefern wir unsere Kunden mit hochwertigen Qualitätsprodukten „MADE IN GERMANY“.

Primed[®] entwickelt und fertigt alle Produkte in Eigenregie,- in einem-zertifizierten Entwicklungsprozess nach DIN EN 13485.


Anfangen mit einer Produktidee entstehen in unserem Haus nach Materialtests, dem Bau von Werkzeugen und der Produktzulassung innovative Medizinprodukte aus einer Hand. Unsere Fertigungstiefe erstreckt sich auf den gesamten Herstellungsprozesses (Spritzguss/Extrusion/Montage) und beinhaltet auch die Sterilisierung der Produkte in unserer eigenen ETO-Sterilisationsanlage.

So können wir äußerst flexibel auf Marktanforderungen reagieren und eine kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Produkte gewährleisten.

Darmrohre & Darmkatheter.....	5
Darmrohre ohne Ballon	6
Ballondarmrohre.....	7
Spezialkatheter	10
Kontrastmittelbeutel	12
Zubehör	16

Darmrohre und Darmkatheter werden in der Kolondiagnostik im Rahmen radiologischer Untersuchungen eingesetzt. Sie kommen bei Röntgenuntersuchungen im Monokontrast- oder Doppelkontrastverfahren zum Einsatz und ermöglichen eine eingehende Untersuchung des Dickdarms.

Je nach Patientenanforderung und Untersuchungsmethode sind sie mit oder ohne Ballon sowie mit und ohne integriertem Luftinsufflationsschlauch erhältlich.

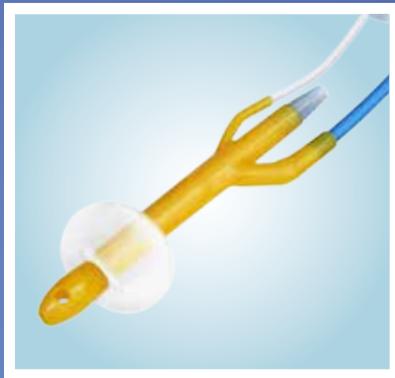

DARMROHRE OHNE BALLON



VPE/VSE

ART.NR.

10/100

20073

Darmrohr, für Erwachsene

- einteilig, mit Olive (Ø 16 mm)
- konischer Schaft aus weichem, flexiblen PVC (DEHP-frei)
- zentrale Öffnung und 4 seitliche Augen
- mit transparentem Stufenkonnektor
- Länge = 160 mm



VPE/VSE

ART.NR.

10/100

21548

Darmrohr mit Luftzufuhr, für Erwachsene (Doppelkontrast)

- einteilig, mit Olive (Ø 17 mm)
- konischer Schaft aus weichem, flexiblen PVC (DEHP-frei)
- zentrale Öffnung und 2 seitliche Augen
- Schlauchzugang für Luftinsufflation
- mit transparentem Stufenkonnektor
- Länge = 180 mm

VPE/ VSE = VERPACKUNGSEINHEIT/ VERSANDEINHEIT

BALLONDARMROHRE



Ballondarmrohr für Erwachsene

- einteilig, mit Olive (Ø 16 mm)
- konischer Schaft aus weichem, flexiblen PVC (DEHP-frei)
- weicher Silikonballon mit Luer-Lock-Anschluss
- zentrale Öffnung und 2 seitliche Augen
- mit transparentem Stufenkonnektor
- inklusive Luer-Lock Spritze
- Länge = 155 mm

VPE/VSE

ART.NR.

10/100

21546



Ballondarmrohr für Erwachsene

- einteilig, mit Olive (Ø 16 mm)
- konischer Schaft aus weichem, flexiblen PVC (DEHP-frei)
- weicher Silikonballon mit Luer-Lock-Anschluss
- zentrale Öffnung und 2 seitliche Augen
- mit transparentem Stufenkonnektor
- Länge = 155 mm

VPE/VSE

ART.NR.

250/250

20101

VPE/ VSE = VERPACKUNGSEINHEIT/ VERSANDEINHEIT

BALLONDARMROHRE



Ballondarmrohr für Erwachsene

- zweiteilig, mit Olive (Ø 16 mm)
- konischer Schaft aus weichem, flexiblen PVC (DEHP-frei)
- weicher Silikonballon mit Luer-Lock-Anschluss
- zentrale Öffnung und 2 seitliche Augen
- mit transparentem Stufenkonnektor
- inklusive Luer-Lock Spritze
- Gesamtlänge = 380mm (inklusive Schlauchverlängerung)

VPE/VSE

ART.NR.

10/100

21545



Ballondarmrohr für Erwachsene

- zweiteilig, mit Olive (Ø 16 mm)
- konischer Schaft aus weichem, flexiblen PVC (DEHP-frei)
- weicher Silikonballon mit Luer-Lock-Anschluss
- zentrale Öffnung und 2 seitliche Augen
- mit transparentem Stufenkonnektor
- Gesamtlänge = 380mm (inklusive Schlauchverlängerung)

VPE/VSE

ART.NR.

125/125

20089

VPE/ VSE = VERPACKUNGSEINHEIT/ VERSANDEINHEIT

BALLONDARMROHRE



Ballondarmrohr für Erwachsene

- zweiteilig, mit Olive (Ø 16 mm)
- konischer Schaft aus weichem, flexiblen PVC (DEHP-frei)
- weicher Silikonballon mit Trichteranschluß
- zentrale Öffnung und 2 seitliche Augen
- mit transparentem Stufenkonnektor
- Gesamtlänge = 380mm (inklusive Schlauchverlängerung)

VPE/VSE

ART.NR.

125/125

20133



Ballondarmrohr mit Luftzufuhr, für Erwachsene (Doppelkontrast)

- einteilig, mit Olive (Ø 15 mm)
- konischer Schaft aus weichem, flexiblen PVC (DEHP-frei)
- weicher Silikonballon mit Luer-Lock-Anschluß
- zentrale Öffnung und 2 seitliche Augen
- Schlauchzugang für Luftinsufflation
- mit transparentem Stufenkonnektor
- inklusive Luer-Lock Spritze
- Länge = 180 mm

VPE/VSE

ART.NR.

10/100

21544

VPE/ VSE = VERPACKUNGSEINHEIT/ VERSANDEINHEIT

SPEZIALKATHETER

Darmrohr, für Kinder

- einteilig ohne Olive
- konischer Schaft aus weichem, flexiblen PVC (DEHP-frei)
- zentrale Öffnung und 2 seitliche Augen
- atraumatische Spitze (Ø 8 mm)
- mit transparentem Stufenkonnektor
- Länge = 170 mm

VPE/VSE

ART.NR.

10/20

21547

PRIREKTOSILK, Rektalkatheter für Früh- und Neugeborene

- konisch geformte Analolive mit Griffteil (Länge = 3,5 cm)
- 30 cm langer Schlauchanschluss mit Luer-Lock Ansatz
- die spezielle Olivenform ermöglicht eine sichere Abdichtung der Analöffnung
- aus weichem und flexiblem medizinischen Silikon gefertigt

VPE/VSE

ART.NR.

10/100

20693

VPE/ VSE = VERPACKUNGSEINHEIT/ VERSANDEINHEIT

SPEZIALKATHETER

Anus Praeter Katheter

- für radiologische Untersuchungen bei Patienten mit einem künstlichen Darmausgang
- gefertigt aus weichem, flexiblen PVC (DEHP-frei)
- Schlauchkatheter mit einer seitlichen Öffnung am vorderen Ende und einem Stufenkonnector am hinteren Ende
- mit kegelförmiger Verdickung für eine sichere Abdichtung des Darmausgangs und einem Haltepflaster zur Fixierung auf der Hautoberfläche
- mit Schiebeklemme

VPE/VSE

ART.NR.

1/125

21543

VPE/ VSE = VERPACKUNGSEINHEIT/ VERSANDEINHEIT

Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an Kontrastmittelbeuteln.



KONTRASTMITTELBEUTEL



Kontrastmittelbeutel

- 2500 ml Beutel mit Verschlusskappe
- fest verbundener Schlauch mit Einhandklemme (Länge = 180 cm)

VPE/VSE

ART.NR.

80/80

21424



Kontrastmittelbeutel mit Stopball

- 2500 ml Beutel mit Stopball und Verschlusskappe
- fest verbundener Schlauch mit Einhandklemme (Länge = 180 cm)

VPE/VSE

ART.NR.

80/80

21425

VPE/ VSE = VERPACKUNGSEINHEIT/ VERSANDEINHEIT

KONTRASTMITTELBEUTEL



Kontrastmittelbeutel mit Luftzufuhr

- 2500 ml Beutel mit Luer-Lock Ventil und Verschlusskappe
- fest verbundener Schlauch mit Einhandklemme (Länge = 180 cm)

VPE/VSE

ART.NR.

80/80

21421



Kontrastmittelbeutel mit Y-Stück

- 2500 ml Beutel mit Verschlusskappe
- fest verbundener Schlauch mit Einhandklemme und Y-Stück (Länge = 200 cm)
- Y-Stück ermöglicht den Anschluß eines weiteren Beutels und ist mit einer weiteren Einhandklemme individuell verschließbar

VPE/VSE

ART.NR.

80/80

21422

VPE/ VSE = VERPACKUNGSEINHEIT/ VERSANDEINHEIT

KONTRASTMITTELBEUTEL



Kontrastmittelbeutel mit Drehverschluß

- 2000 ml Beutel mit Drehverschluß
- fest verbundener Schlauch mit Schiebeklemme (Länge = 150 cm)

VPE/VSE

ART.NR.

80/80

21541

VPE/ VSE = VERPACKUNGSEINHEIT/ VERSANDEINHEIT

PUMPE & SITZRING

Pumpe für die Luftinsufflation

- für die Luftinsufflation in den Darm während des Doppelkontrastverfahrens
- mit schwarzem Stufenkonnektor zum Anschluß an den blauen Schlauch der Doppelkontrast-Darmrohre mit Luftzufuhr (Art.Nr. 21548, 21544)
- latexfrei
- DEHP-frei

VPE/VSE

ART.NR.

10/300

21549

Sitzring für Kontrastmitteleinlauf

- Ø innen 34,0 cm
- leicht aufblasbar
- latexfrei
- DEHP-frei

VPE/VSE

ART.NR.

1/25

21557

VPE/ VSE = VERPACKUNGSEINHEIT/ VERSANDEINHEIT

HERSTELLER

Primed[®] HALBERSTADT
MEDIZINTECHNIK GMBH
STRASSE DES 20. JULI 1
D-38820 HALBERSTADT
TEL.: 0049-(0)3941-668-6
FAX: 0049-(0)3941-24565
PRIMED@PRIMED-HALBERSTADT.DE

VERTRIEB

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

REVISIONSSTATUS: JULI 2015